

PROBLÉMA ÉS MEGOLDÁS:

JELENSÉG	VIZSGÁLAT	MEGOLDÁS
A készülék "DaDa" hangot ad:	Ez a motor hangja, vagy a fő egység és a ruhaanyag összedörzsölődése.	Nem kell semmit sem tennie.
Az ágy nem működik	A csatlakozó dugó megfelelően csatlakozik?	Csatlakoztassa megfelelően.
	A készülék be van kapcsolva?	Kapcsolja be.
	A biztosíték megsérült?	Cserélje ki a biztosítékot.
Némelyik zenét nem játsza le a készülék.	A zene Mp3 formátumban van?	Cserélje Mp3 formátumra.
A fejhallgató nem működik.	Fejhallgató megfelelően van csatlakoztatva?	Csatlakoztassa megfelelően.
	Adathordozó megfelelően van csatlakoztatva?	Csatlakoztassa megfelelően.
	Van zene az adathordozón?	Másoljon zenét az adathordozóra
A fő és a kézi egység lámpája nem világít.	A hőmérséklet kapcsoló be van kapcsolva?	Állítsa be a hőmérsékletet.
	A beállított hőmérséklet elérte a kívánt hőmérsékletet.	Nem kell semmit sem tennie.

TECHNIKAI ADATOK:

Megnevezés:	Jade köves masszázságy
Model:	AYJ-08B
Doboz méret:	1160*670*310 mm
Súly bruttó/nettó:	44,5/40,5 kg
Feszültség/frekvencia:	230V/50Hz
Teljesítmény:	280W



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

az **AYJ-08B** típusú Jade köves masszázságyhoz



Kérjük használat előtt feltétlen olvassa végig a használati útmutatót!

Elektrikó Kft. mint forgalomba hozó tanúsítjuk, hogy a készülék a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekkel, CE megfelelőséggel rendelkezik, és megfelel az ISO9001-2000 szabványnak.

Forgalomba hozza: Elektrikó Kft.

2115, Vácszentlászló Zsámboki út 047/3HRSZ

Garanciaviselő: Elektrikó Kft.

Vegye igénybe alkatrész csomagküldő szolgálatunkat és szervízünket

Szervíz: 06-28485015,


28-570501/36,

06-20-5229741

Tartalomjegyzék

Biztonsági utasítás	2
Működési környezet:.....	2
Nem ajánlott	2
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK	3
AZ ÁGY ÖSSZEÁLLÍTÁSA	4
A KÉSZÜLÉK RÉSZEI	5
VEZÉRLŐ HASZNÁLATA	6
VFD KIJELZŐ ÉS FUNKCIÓK	7
SZERKEZET ÉS FUNKCIÓ	8
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA	8
KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS	9
PROGRAM SZEMLÉLTETÉS	10
PROBLÉMA ÉS MEGOLDÁS	11
TECHNIKAI ADATOK	11

PROGRAM SZEMLÉLTETÉS:

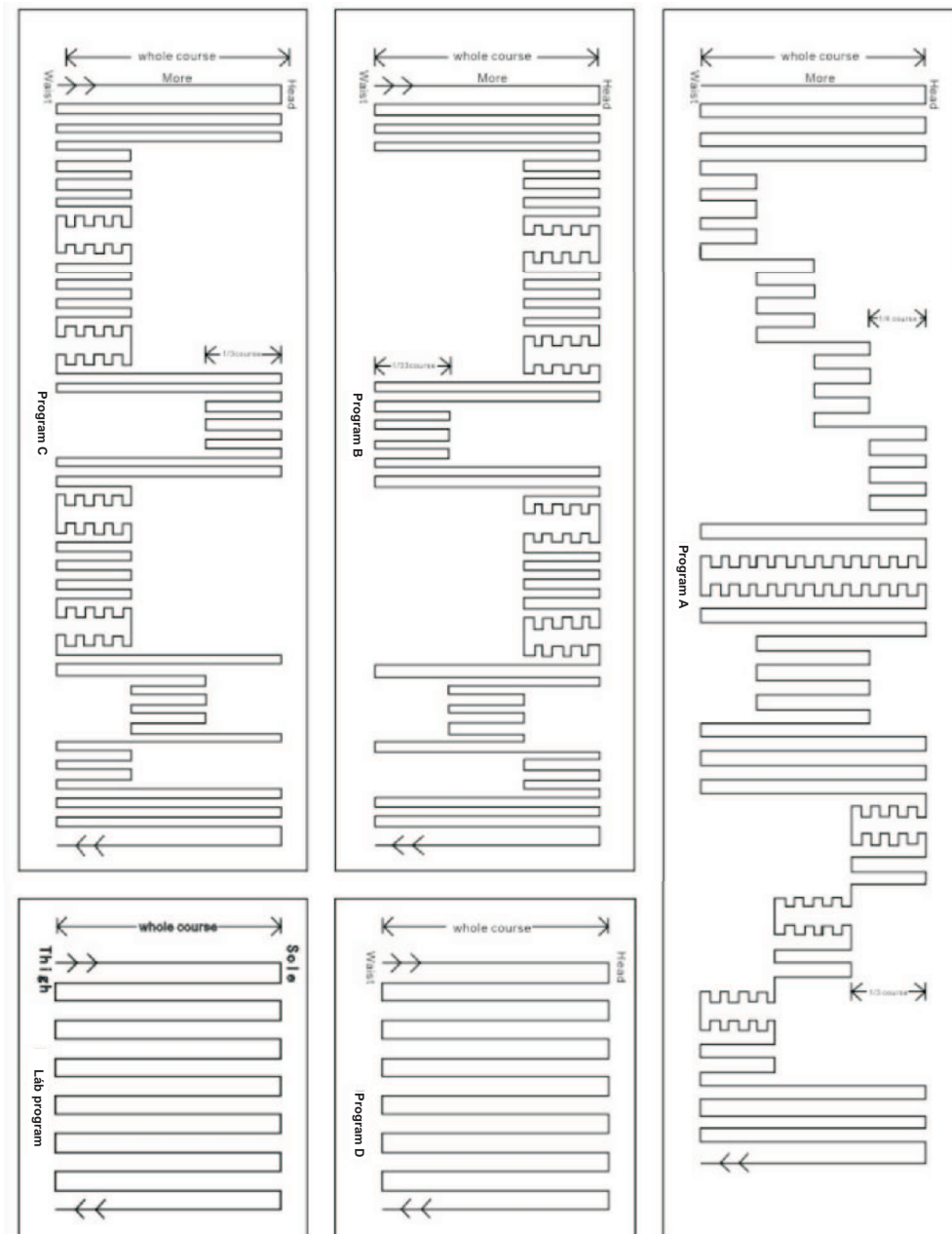

- Kézi egység hőmérsékletének beállítására (1.gomb):
A beállítható hőmérséklet 40 - 70°C. A “+” és “-” gombokkal tudja a beállítást elvégezni (léptetés 5 °C-onként).
Javasoljuk, hogy első használatkor állítsa a hőmérsékletét 45 °C-ra, majd fokozatosan állítsa melegebbre a kézi egység hőfokát.
Csak kellemes érzetig melegítse fel.
- Ha bekapcsolja be az infravörös fénysugár gombját (16. gomb), a hátrészt infra fogja melegíteni, a hőmérséklet automatikusan beáll 50 °C-ra.
- Válasszon egyet a négy automata üzemmód A, B, C, D közül, és kapcsolja be.
- A hátrész (4. gomb) és lábrész (5. gomb) görgőinek kézi állítása:
a “fel” (Up) vagy “le” (Down) gombokkal állíthatja, hogy a görgők merre mozogjanak. Ha a “fel” vagy “le “ gombot kétszer egymásután megnyomja, akkor a görgő azon a ponton megáll.
- Hattámla dőlésszögének állítása (6. gomb):
A” fel” gombbal emelheti, a “le” gombbal süllyesztheti a háttámlát. Ha valamelyik gombot megegyeszer lenyomja, akkor a háttámla mozgása leáll.
- Mp3 lejtó bekapcsolásához nyomja le a “Lejátszás” (Play) gombot, a leállításához pedig a “pillanat állj” (Pause) gombot. Léptetéshez az előre-, vagy hátraléptetés gombokat használhatja.
- STOP (leállítás) gomb lenyomásakor minden művelet, beleértve az Mp3 lejátszót is leáll és az éppen aktuális pocícióban marad.
A STOP gomb ismételt lenyomásakor minden művelet folytatódik.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS:

Karbantartás:

Ha az ágy bepiszkolódik, tisztítsa semleges tisztítószerrel és pamut ronggyal. Majd száraz ronggyal törölje át.



Figyelem! Ne használjon maró hatású tisztítószeret pl. Alkohol...! Z károsíthatja az ágy felületét, elszínezhetik a burkolatot, a csavarok rozsdásodhatnak.



Figyelem! A vezérlő rész soha ne tisztítsa nedves, vagy vizes ruhával.

Tárolás:

Tárolja a készüléket tiszta, száraz, fagymentes helyen, ahol védve van a mechanikus behatások, túlhevülés, nedvesség stb. ellen.

Ha hosszú ideig nem használja a készüléket takarja le, hogy megvédje a portól.

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta.

Biztonsági utasítás



Kérjük mielőtt használatba venné a masszázsgépet alaposan olvassa el ezt az útmutatót, és tartsa be a leírt utasításokat.

A helytelen használat személyi sérülést, egyéb balesetet, vagy a készülék meghibásodását okozhatja.

Működési környezet:



Ne használja a készüléket nedves, vizes környezetben.

Ne tegye ki a készüléket magas hőnek, vagy erős napfénynek.

Helyezze a készüléket sík, kemény felületre (padló, szőnyeg...)

Nem ajánlott:



Az alább felsorolt esetek bármelyike esetén a készülék használatával kapcsolatban kérje ki orvosa tanácsát!

- Orvosi kezelés alatt áll vagy rosszul érzi magát.
- Rosszindulatú daganata van.
- Magas láza van.
- Gerincbántalmak vannak vagy régebbi baleset/betegség okozta ferde vagy sérült a gerincoszlopa.
- Terhes nőknél
- Frissen műtötnél (3–6 hónapig)
- Erősen visszeres végtagoknál
- Agyműtét után (1,5 évig)
- Pacemaker,elektronikus implantátum esetén

Legyen figyelemmel a vezérlő és a kézi melegítő egységekre



- Soha ne fogja meg a vezérlő és a kézi egységet vizes, vagy nedves kézzel.
- Ne ejtse földre vagy vízbe a vezérlő és a kézi egységet.
- Ne húzza a kábeleket túl nagy erővel-
- Ha nem használja a készüléket tegye vezérlőt a tartójára, a külső kézi egységeket pedig a védőtáskába.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK:



- Ellenőrizze, hogy a helyi hálózat feszültsége megegyezik a készülék adattábláján jelzettel.
- Ne használja a készüléket és ne fogja meg annak kábeleit nedves kézzel. Ne működtesse a masszázst ha a csatlakozó dugó, vagy az elektomos kábel sérült.
- Használat előtt győződjön meg róla, hogy az ágy megfelelően rögzítve van a keretbe. Ha nem, akkor rögzítse azt a készülék használata előtt.
- Ne engedje, hogy a készüléket fizikailag legyengült, érzéki és mentális zavarban szenvedő, tapasztalatlan személyek, vagy gyermekek felügyelet nélkül használják.
- Ne használja a masszázst közvetlenül étkezés után, vagy ha rosszul érzi magát.
- Vihar esetén azonnal hagyja abba a készülék használatát kapcsolja ki és áramtalanítsa azt.
- Ha használat közben a készülék a normálistól eltérően működik, hagyja abba a működtetését. Áramtalanítsa a készüléket és vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.
- Az ágy mozgatasakor, vagy használat után mindig húzza ki a készülék csatlakozóját az elektromos hálózathoz. Ne fogja meg nedves, vizes kézzel a csatlakozódugót.
- Használat előtt vegye le övét és ékszereit, pakolja ki a zsebéből a kulcsot, kést, mobiltelefont stb.
- Az ágy használata pamut ruhában napi egy vagy két alkalommal ajánlott. Kezelési idő 40-60 perc.
- Ha bőre hőérzékeny, kérjük állítsa a készüléket alacsonyabb hőmérsékletre a használat előtt
- A beállítható hőmérséklet 40 - 70°C.
- Ne használja a készüléket, ha kellemetlenül érzi magát masszázs közben, kérjen tanácsot háziorvosától.
- Ha a készülék kábele megsérül, használjon új kábelt vagy vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.
- Használat után tegye a vezérlőt a tartóra és kapcsolja ki a készüléket.
- Ne próbálja a készüléket átalakítani, megjavítani vagy felújítani. Ha kérdése, problémája van forduljon a szervizhez.


SZERKEZET ÉS FUNKCIÓ:

- Ez a Jade köves masszázst 5 ötvözi az ősi távolkeleti gyógyászat és a modern nyugati egészségügyi technológiát.
- A masszírozó görgők jade és germanium kőből készültek. A felmelegített kövek által sugárzott infrahő hatása, valamint az egész test masszírozása jótékony energiával tölti fel a testet, jótékony hatással van a szervezetre.
- A készülékben több előre beállított program közül is választhatunk. Az egész programot mikroszámítógép vezérli.
- A masszázst egyedi tervezésű vezérlője, széles VFD kijelzőjével egyszerűsíti a kezelést.
- Az ágy Mp3 lejátszóval van felszerelve, melyhez sztereo fejhallgató és egy USB adattároló is jár.
- Tartozék 6 és 12 jade golyós melegítő kézi egység. (Távolsági infravörös hő, moxibuszció). Beállítható hőmérséklet 40 - 70°C, a test minden részéhez használható.
- Az egyedi tervezésű ágykeret és az állítható felső (háttámla) rész lehetővé teszi, hogy kiválassza a legkényelmesebb szöveget.
Megjegyzés: A legjobb hatásfok érdekében ajánlott a masszázst teljesen vízszintes helyzetben használni.
- **Övja a görgőket:** ne masszon keresztül az ágyon túlságosan megterhelve ezzel a görgőket. Az ágy közepén üljön fel, majd helyezkedjen el, mielőtt bekapcsolná a készüléket. Lábmasszázs ne húzza fel a lábát amiben megakadhat a görgő. Mindkét lábát nyújtsa ki, így súlya egyenletesen eloszlik a két görgő soron.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA:

- Helyezze az összeszerelt masszázst sík felületre.
- Ellenőrizze, hogy a helyi hálózat feszültsége megegyezik az ágy adattábláján szereplővel. Csatlakoztassa a vezetékeket, majd kapcsolja be a készüléket.
- Kapcsolja be a vezérlőt. A VFD kijelző mutatja az aktuális állapotot.
- 8. gomb bekapcsolja a 6 & 12 jade köves kézi egységeket.
- Nyomja meg a kézi időbeállítás gombot (3. gomb). A beállítható időtartam 5-60 perc. A "+" gombbal 5 perccel növelheti, a "-" gombbal 5 perccel csökkentheti a beállított időt.
- Fő egység hőmérsékletének beállítása (2. gomb): A beállítható hőmérséklet 40 - 70°C. A "+" és "-" gombokkal tudja a beállítást elvégezni (léptetés 5 °C-onként). Javasoljuk, hogy első használatkor állítsa a készüléket 55 °C-ra, majd fokozatosan állítsa melegebbre az ágy hőfokát. Csak kellemes érzetig melegítse fel.

VFD KIJELZŐ ÉS FUNKCIÓK:

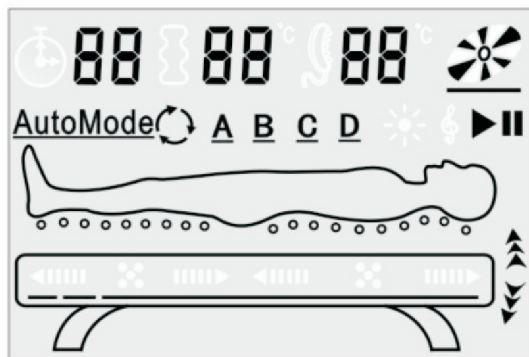

88 - Idő megjelenítése: Ha a masszázsszék működik, ez mutatja a hátralévő időt. (Egység: perc)

88° - Fő egység hőmérsékletének kijelzője: Ha a fő egység (belső projektor) működik, ez mutatja az aktuális hőmérsékletet.

88° - Kézi egység hőmérsékletének kijelzője: Ha a kézi egység működik, ez mutatja az aktuális hőmérsékletet.

- Mp3 lejátszó kijelzője: amikor megnyomja a "lejátszás (play)" gombot, a "színes lemez" forogni kezd és a ► ikon világít. Amikor megnyomja a "pillanat állj (pause)" gombot a "színes lemez" megáll, a || ikon világít, a ► pedig kialszik.

- Infravörös hő kijelzője: akkor világít, ha az infravörös sugár gombot megnyomja.

- Automata üzemmódok:
A. Teljes test program
B. Nyak program
C. Derék program
D. Szabad program

- Háttámla emelésének visszajelző lámpája.


- Fő egység visszajelző lámpa: az a két pont világít, ahol a fő egység éppen tart.

- A fő egységek mozgási iránya: a lámpa nem világít, ha a fő egység leáll.


- Akkor világít ha a háttámla fűt.

AZ ÁGY ÖSSZEÁLLÍTÁSA:

Mielőtt a lábakat felszerelné, helyezze be a csavarok alá a csavarvédőket, majd húzza meg a csavarokat.

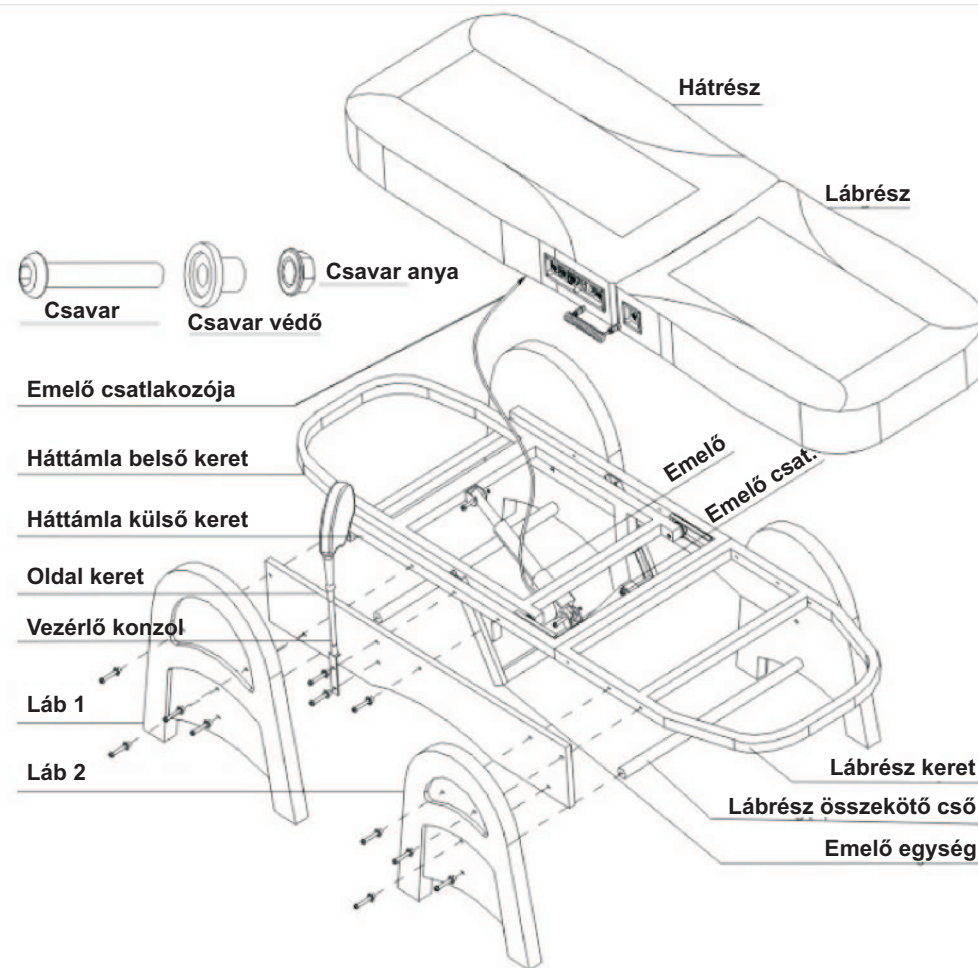

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI:

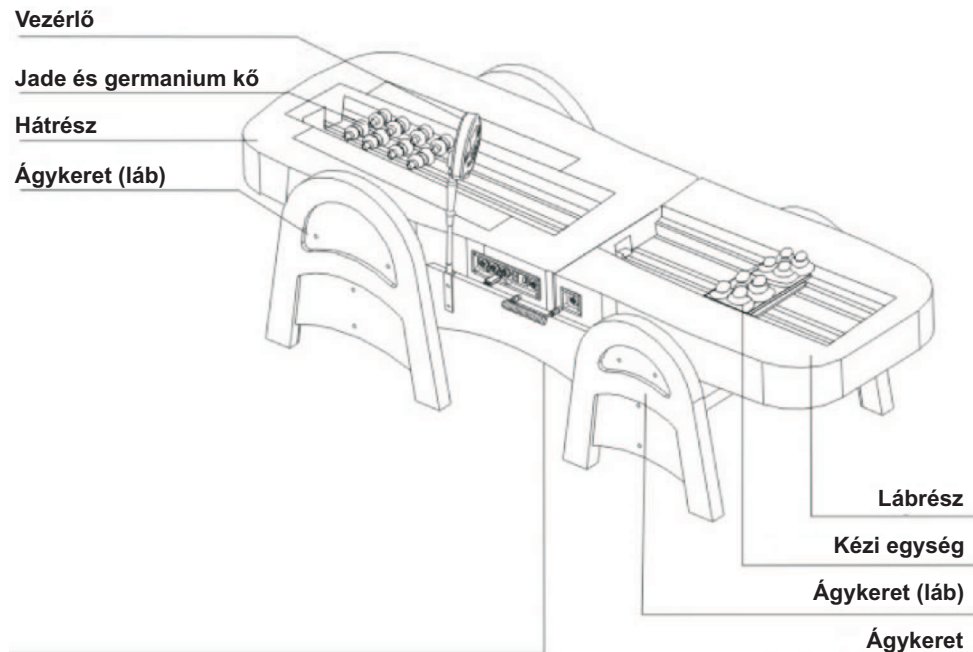

Csatlakozás a 12 jade köves kézi egységhez

Csatlakozás a 6 jade köves kézi egységhez

Vezérlő csatlakozás

Fejhallgató csatlakozás

Fejhallgató

USB adathordozó

USB adathordozó csatlakozás


Hálózati csatlakozás

Hát- és lábrész csatlakozás

6 jade köves kézi egység

12 jade köves kézi egység

VEZÉRLŐ HASZNÁLATA:

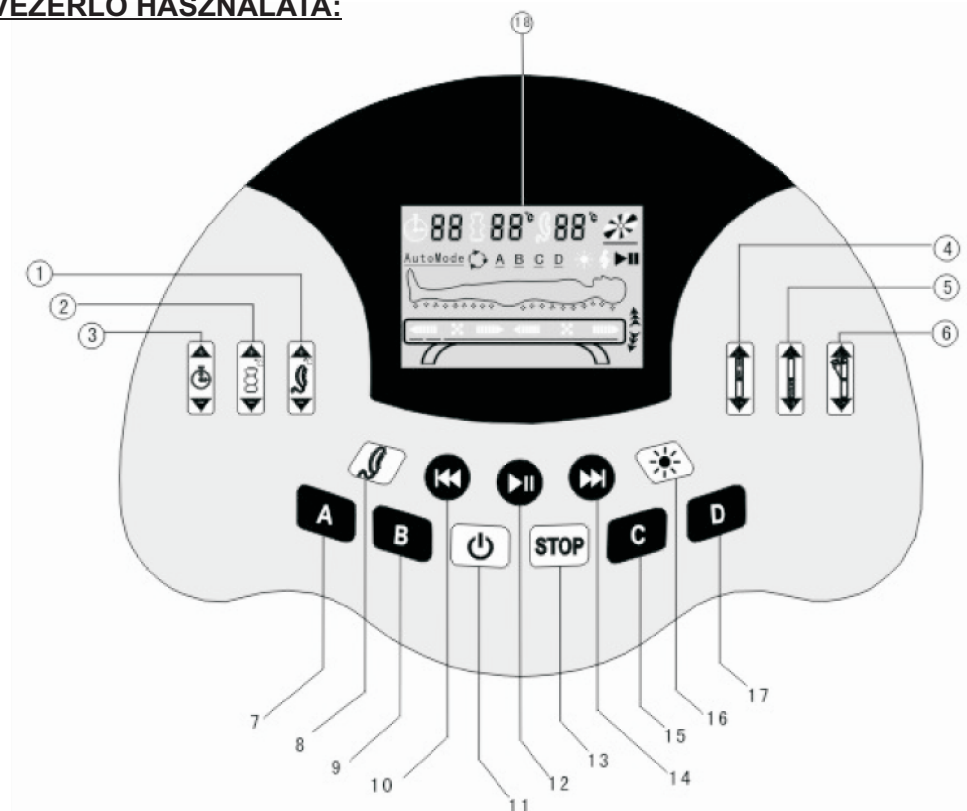

1. Hőmérséklet szabályzó (kézi melegítő egység)
2. Hőmérséklet szabályzó ágy (fő egység)
3. Idő kézi beállítása
4. Hátrész görgőinek kézi állítása
5. Lábrész görgőinek kézi állítása
6. Hattámla állítása
7. Automatikus üzemmód A
8. Kézi melegítő egység kapcsoló
9. Automatikus üzemmód B
10. Hátra léptetés
11. Bekapcsolás
12. Lejátszás/pillanat állj
13. STOP (leállítás)
14. Előre léptetés
15. Automatikus üzemmód C
16. Infravörös sugár gomb
15. Automatikus üzemmód D
18. VFD kijelző